

使用目的又は効果：あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ

安全に関するご注意

○次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例) 血栓(塞栓)症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

○次の人は、必ず医師と相談のうえ使用してください。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・ 悪性腫瘍のある人・心臓に障害のある人・温度感覚喪失が認められる人・妊娠中や出産直後の人
- ・ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人・皮膚に創傷のある人
- ・ 安静を必要とする人・体温38℃以上(有熱期)の人
例) 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや衰弱しているとき
- ・ 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人・腱鞘炎の人・その他、医療機関で治療中の人

○小さなお子様や自分で意思表示ができない人、自分で操作できない人には使用させない。

その他の禁止事項や注意すべき点は、商品同梱の取扱説明書及び添付文書に記載しております。

商品をご使用前に必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

[ご不明な点や部品交換に関するご相談は]

セールス・オンデマンド サービスセンター

TEL:0120-542-093 (通話料無料)^{※1}

受付時間 9:30 ~ 17:30 (土・日・祝日、年末年始を除く)^{※2}

※1 携帯電話からもご利用いただけます。

※2 午前中は大変混み合いますので、比較的つながりやすい午後におかけください。

ホームページ **<https://restool.jp/>**

[販売元]

セールス・オンデマンド株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-8 KDX御茶ノ水ビル5階

製品改良のため、デザイン、仕様を一部変更する場合があります。印刷物の色は、実際の商品と異なる場合があります。restool、レスツール、restool ロゴは、Hutech Industry Co., LTD. の商標および登録商標です。写真、イラストはイメージです。このカタログの内容は2022年6月時点のものです。

restool



Stool Foot Massager / スツールフットマッサージャー
Compact Seat Massager / コンパクトシートマッサージャー

あなたの生活空間にとけ込み、 憩いのひとときを提供する restool（レスツール）

インテリアに馴染むデザインなので、マッサージャーとして使わない時でも出しておける。
準備や収納などの煩わしさが無いので、いつも近くにあって、気軽に使いやすい。
restoolが、日常にやすらぎと憩いのひとときを提供します。

Stool Foot Massager
スツールフットマッサージャー
HT-M210J／M213J／M215J



Compact Seat Massager
コンパクトシートマッサージャー
HT-4700J／4703J／4705J



Stool Foot Massager

スツールフットマッサージャー

空間と調和する、家具のような本格的フットマッサージャー



スツール、オットマンとして、出しっぱなしでも使える1台3役

準備や片付け、収納の手間やスペースが必要ありません。



マッサージ器として



オットマンとして



スツールとして

ローラー & エア圧力 & バイブレーション & ヒーター

足の部位それぞれの心地よさを追求した、こだわりの4つの機能

指圧ローラー

土踏まず

前足部

つま先



押し流し & 指圧で
本格足裏マッサージ

回転する指圧ローラーの動きに合わせて、
もみ心地が変化します。



エア圧力

甲



足全体を包みこんで
エア圧力マッサージ

エアバッグが足の甲を包み込み、
手もみ感覚を再現。
指圧ローラーと連動しながらほぐします。



アキレス腱

かかと



エアカプセルで
心地よく指圧

エアバッグの動きにあわせて、
かかと周りを指圧するような程よい刺激を与えます。



バイブレーション

かかと

ふくらはぎ

太もも



かかとへの上下の振動でジグリング

かかとを上下に振動させることで「ジグリング（貧乏
ゆすり）」の動きを再現。足全体に振動を与えながら
ほぐします。



ジグリング運動とは、かかとの上下運動によって
足全体を揺さぶることで、太ももやふくらはぎの
筋肉弛緩作用を期待されているものです。

ヒーター

つま先

甲



温めながら
気持ちよくほぐす

足の甲側にヒーターが付いているので温かさが
伝わりやすいのがポイント。

マッサージの好みに合わせて選べる3つのオートプログラム

4つの機能を最適に組み合わせた3種類のオートプログラムをご用意。



エア圧力調整ボタン
オートモード中のエア圧力の強さを弱・中・強の3段階で切替。



ヒーターボタン
マッサージ部のヒーターのオン／オフ。
※ヒーター機能による温熱治療効果はありません。



停止ボタン
全ての機能が停止、電源オフ。



電源・モードボタン
電源のオンと、マッサージモードの切替。

選べる3つのモード



リラク্সモード(青)
エア圧力中心のマッサージ
指圧ローラーの回転数:少 / エア圧力の回数:少



ノーマルモード(緑)
刺激が少なめのマッサージ
指圧ローラーの回転数:少 / エア圧力の回数:多



しっかりモード(赤)
足裏中心のマッサージ
指圧ローラーの回転数:多 / エア圧力の回数:中

ヒーター機能付の座面カバー

座面にもヒーターを内蔵。
足を置いたり、
座って温まることができます。



取り外して洗えるフットカバー

フットカバーはファスナーで簡単に取り外して、
洗濯機でも洗えるので清潔にご使用いただけます。
(取扱説明書やラベルに記載の洗濯表示に従ってください。)



1カ月の電気代は約8円

毎日1回15分使っても電気代は約8円と経済的です。
(料金単価は27円/kWhで算出。)



15分オートオフタイマー

スタートから15分で電源が切れる仕組みなので使いすぎや
切り忘れの心配がありません。
※カバーヒーター、マッサージ部ヒーター含む。



「リビングにふさわしいデザイン」がコンセプトのフットマッサージャー

世界でも認められたデザイン と 選べる3色のカラーバリエーション

インテリアとしてのデザイン性が評価され、国際的なデザイン賞を受賞しました。
お部屋の雰囲気やインテリアに合わせたカラー展開から、お好みで選べます。



家具調のテキスタイルデザイン

上質な質感のファブリックを張地に使用し、ナチュラルかつモダンさを兼ね備えた風合いに仕上がっています。



持ち運びにも便利な
レザー調のハンドル



ナチュラルな風合いの
木目調の脚



カバーヒーターボタンの
ステッチ



グッドデザイン賞 2020年 (日本)



reddot award 2019
winner

レッドドットアワード2019 (ドイツ)



GOOD DESIGN
신원통상지원부신청

グッドデザイン賞 2017年 (韓国)

Compact Seat Massager コンパクトシートマッサージャー

使い方も自由自在なシートマッサージャー
フットマッサージャーとのコーディネートで素敵なインテリアに



おそろいの上質なテキスタイルで 出しっぱなしでもインテリアに馴染みます



使い方・機能ともに自由なスタイルで

コンパクトながら首からおしりまでをカバーするシートマッサージャー

U型のデザインで、使い方は自由自在。
コった場所をピンポイントにマッサージ
クッションパッドを外したり、向きを変えたりして、
自分でマッサージしたい位置に、微調整することができます。



首、肩



背中



腰



おしり

背もたれがあれば背中や腰、おしりは、両手を離して作業しながらマッサージできます。

もみ × バイブレーション × ヒーター

気分や好みに合わせて、単一でも、
組み合わせても使える3つの機能



3種類のイラストボタンで操作も簡単



もみ玉による指圧マッサージでコリをほぐす

大きさの違うもみ玉で回転時の圧が変わり、手もみ感覚を実現。左右交互の回転方向で、もみ上げともみ下げを心地よいリズムで行います。




ヒーター機能で温めながらほぐす

もみ玉にヒーターを内蔵。マッサージ部位を温めながらマッサージし、気持ちよくほぐします。ヒーター機能の有り無しの使い分けもできます。
※ヒーター機能による温熱治療効果はありません。



バイブレーション機能で血行促進

本体全体から伝わる振動は、もみとは違った心地よさ。座った時には、骨盤の側面からも振動が伝わり、血行を促進しながらほぐします。強弱の切り替え可。

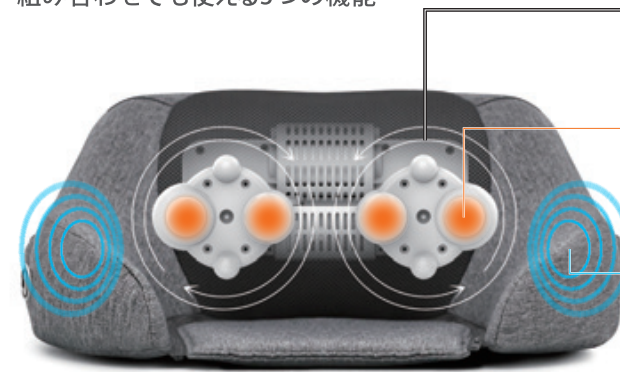

お好きな場所、自由なスタイルでリラックス

軽量でコンパクトなので持ち運びに便利。シーンを問わずに、お好きな場所、スタイルでお使いいただけます。



持ち運びしやすい軽量、
コンパクト設計
本体わずか2.3kg、持ち運びに便利なハンドル付き
で、お好きな場所でマッサージができます。



置き場所を選ばないデザインと
3色のカラーバリエーション
お好みのインテリア、お部屋の雰囲気にもマッチして
馴染みます。

メッシュ素材で快適に
マッサージ部には通気性のよいメッシュ
素材を採用しているので、ムレにくく快適
に使えます。



ヒーターの使用中は点灯でお知らせ
ヒーター機能がオンの時は、もみ玉が赤く点
灯するので、オンオフがひと目でわかります。



1か月の電気代は約3円
毎日1回15分使っても、
1か月の電気代は約3円と経済的です。
(料金単価は、27円/kWhで算出)



15分オートオフタイマー
スタートから15分で電源が切れる仕組みなの
で使いすぎや切り忘れの心配がありません。



製品仕様

Stool Foot Massager

スツールフットマッサージャー



アーバングレー	EAN:8800020700865
パッションオレンジ	EAN:8800020700889
オリーブグリーン	EAN:8800020700872

オプション品:交換用フットカバー
EAN:8800020701008

【販売名】restool スツールフットマッサージャー
【品番】HT-M210J(アーバングレー)/HT-M213J(オリーブグリーン)/HT-M215J(パッションオレンジ)
【一般的名称】家庭用電気マッサージ器
【医療機器分類】管理医療機器
【医療機器認証番号】303AHBZX00022000
【アダプター定格】入力:AC 100-240V 50/60Hz 2.0A、出力:24VDC 2.0A
【消費電力】40W(マッサージ部ヒーター 9.4W/カバーヒーター 22.7W)
【オートパワーオフ】約15分間
【外形寸法(カバー取付け時)】幅 372 × 奥行 434 × 高さ 307mm
【重量】約7.7kg (アダプター含む)
【材質】本体:ABS樹脂、他 張地:ポリエステル フットカバー:ポリエステル、ポリウレタン
【エア圧力(理論値)】最大約40kPa
【耐荷重】120kg以下
【使用環境】温度:0〜40℃、湿度:10〜70%RH
【対応足サイズ】28.5cm以下
【コード長さ】約3m (コード着脱型)
【企画・開発】Hutech Industry Co., Ltd. (韓国)
【生産国】中国
【保証期間】お買い上げ日より1年間

【販売名】restool スツールフットマッサージャー 交換用フットカバー
【品番】HT-M21AJ
【材質】ポリエステル、ポリウレタン
【生産国】中国

Compact Seat Massager

コンパクトシートマッサージャー



アーバングレー	EAN:8800020700896
パッションオレンジ	EAN:8800020700919
オリーブグリーン	EAN:8800020700902

【販売名】restool コンパクトシートマッサージャー
【品番】HT-4700J(アーバングレー)/HT-4703J(オリーブグリーン)/HT-4705J(パッションオレンジ)
【一般的名称】家庭用電気マッサージ器
【医療機器分類】管理医療機器
【医療機器認証番号】303AHBZX00028000
【アダプター定格】入力:AC 100-240V 50/60Hz 1.0A、出力:12VDC 2.5A
【消費電力】14 W(ヒーターのみ 7.2 W)
【オートパワーオフ】約15分間
【外形寸法】約 幅 460 × 奥行 440 × 高さ 200mm
【重量】約2.3kg (アダプター含む)
【材質】本体:ポリウレタン 他、張地/保護カバー:ポリエステル
【横幅(アーム間の内側長さ)】約25cm
【使用環境】温度:0〜40℃、湿度:10〜70%RH
【コード長さ】約1.8m (コード一体型)
【企画・開発】Hutech Industry Co., Ltd. (韓国)
【生産国】中国
【保証期間】お買い上げ日より1年間